



Método de la cinta adhesiva transparente

Util en el diagnóstico de enterobiasis y teniasis.

Rina G. de Kaminsky



Materiales necesarios

- Cinta adhesiva transparente de $\frac{3}{4}$ pulgada
- Tijeras
- Porta-objetos de 3 x 1 pulgada
- Etiquetas
- Baja-lenguas
- Xilol o tolueno
- Pipetas de vidrio con bulbo de hule
- Desinfectante



Uso de guantes

- Algunas personas gustan de utilizar guantes.
- Ofrecen una “protección” falsa si no se utilizan en forma adecuada.
- La autora prefiere lavado de manos cuantas veces sea necesario.....
- O cambio de guantes cuantas veces sea necesario.



Guantes

- Podrá experimentar dificultad con guantes, ya que se pegan con facilidad a la cinta adhesiva.
- Lavado de manos a menudo es lo mejor a criterio de la autora.




Materiales cinta adhesiva





Preparación del material para recoger la muestra a nivel anal

 Pegar un extremo de la cinta en un extremo del porta-objetos

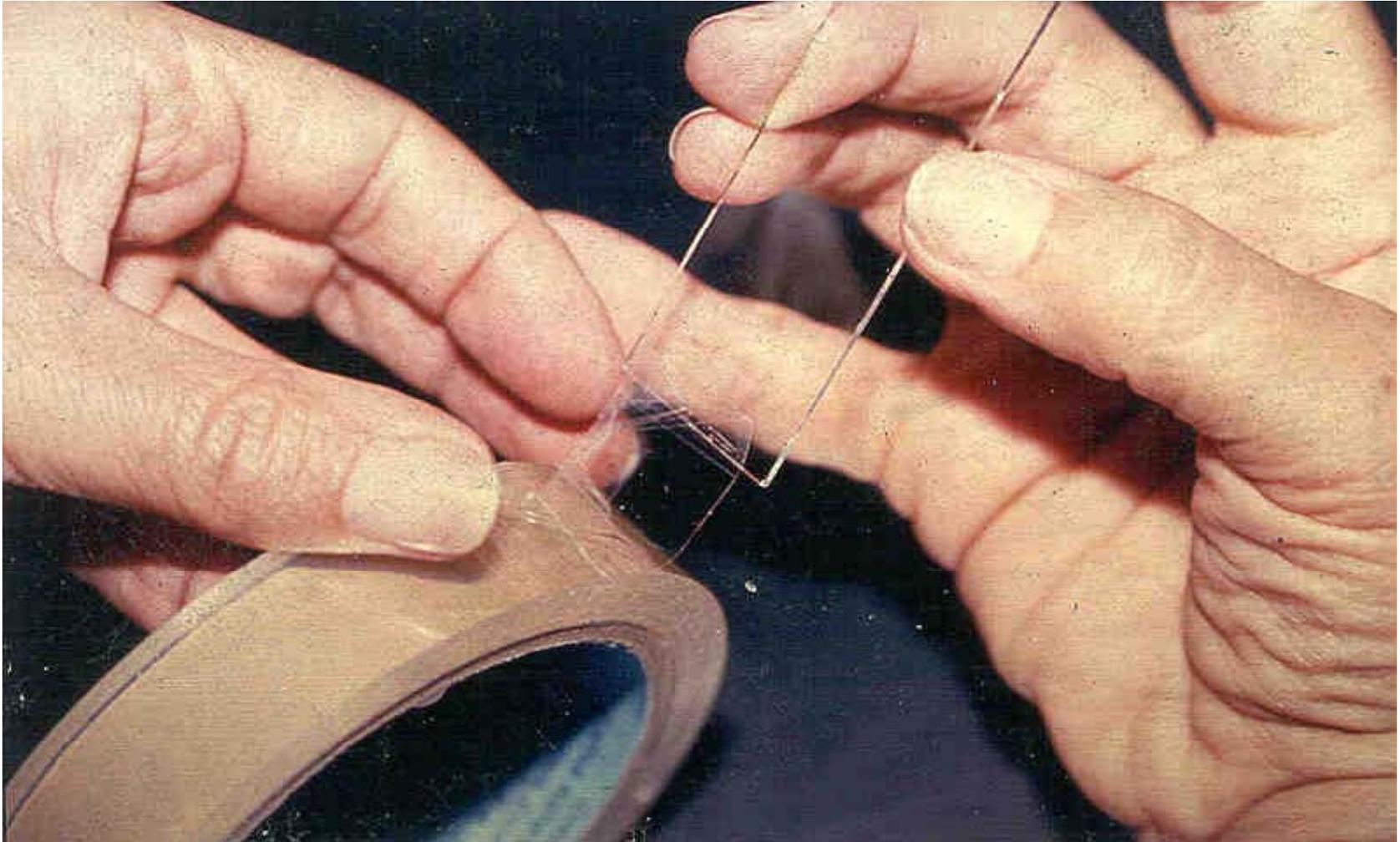




Dar la vuelta y pegar cinta sobre el porta-objetos






Cortar dejando un pedazo libre

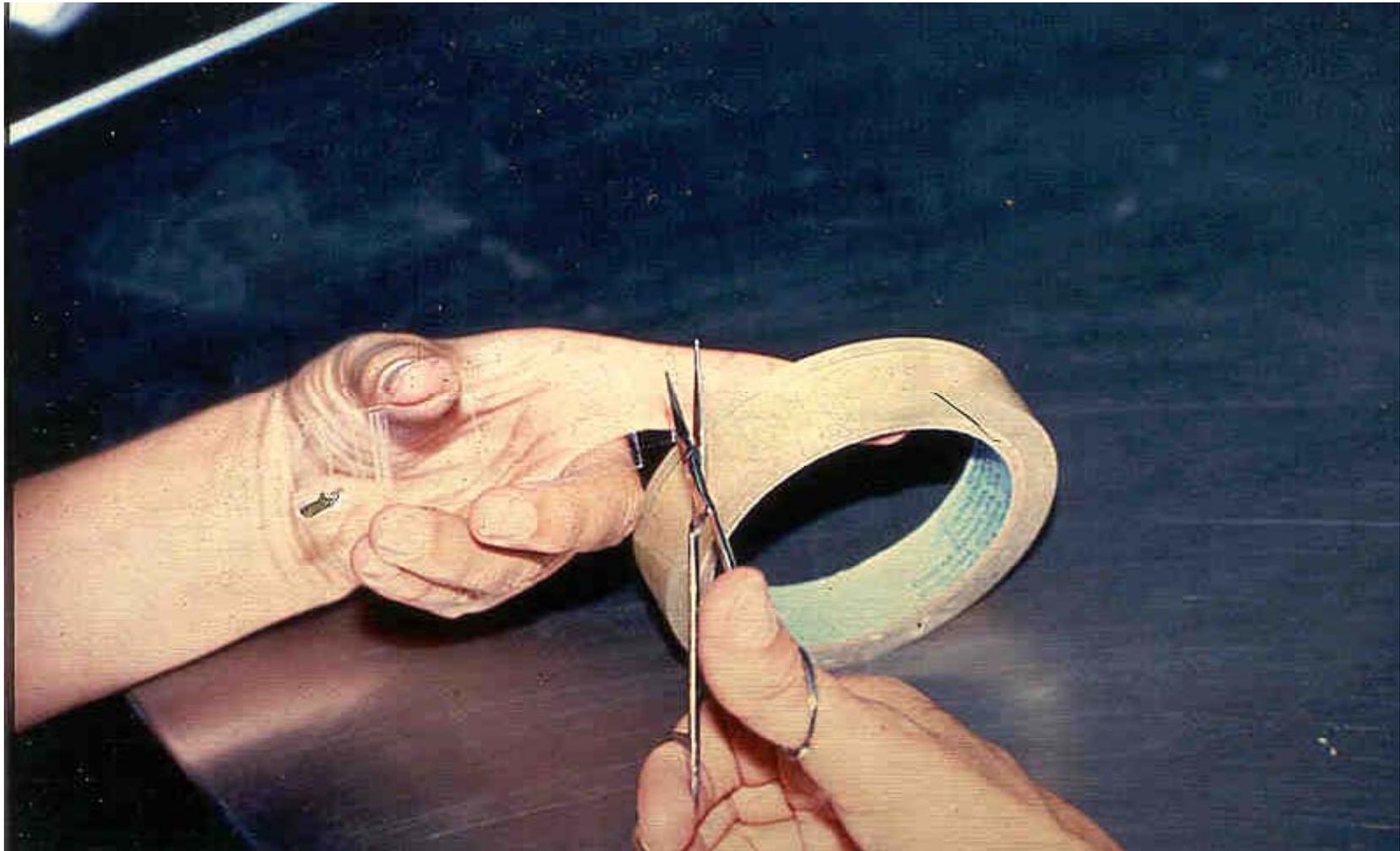




Pegar etiqueta en el pedazo libre

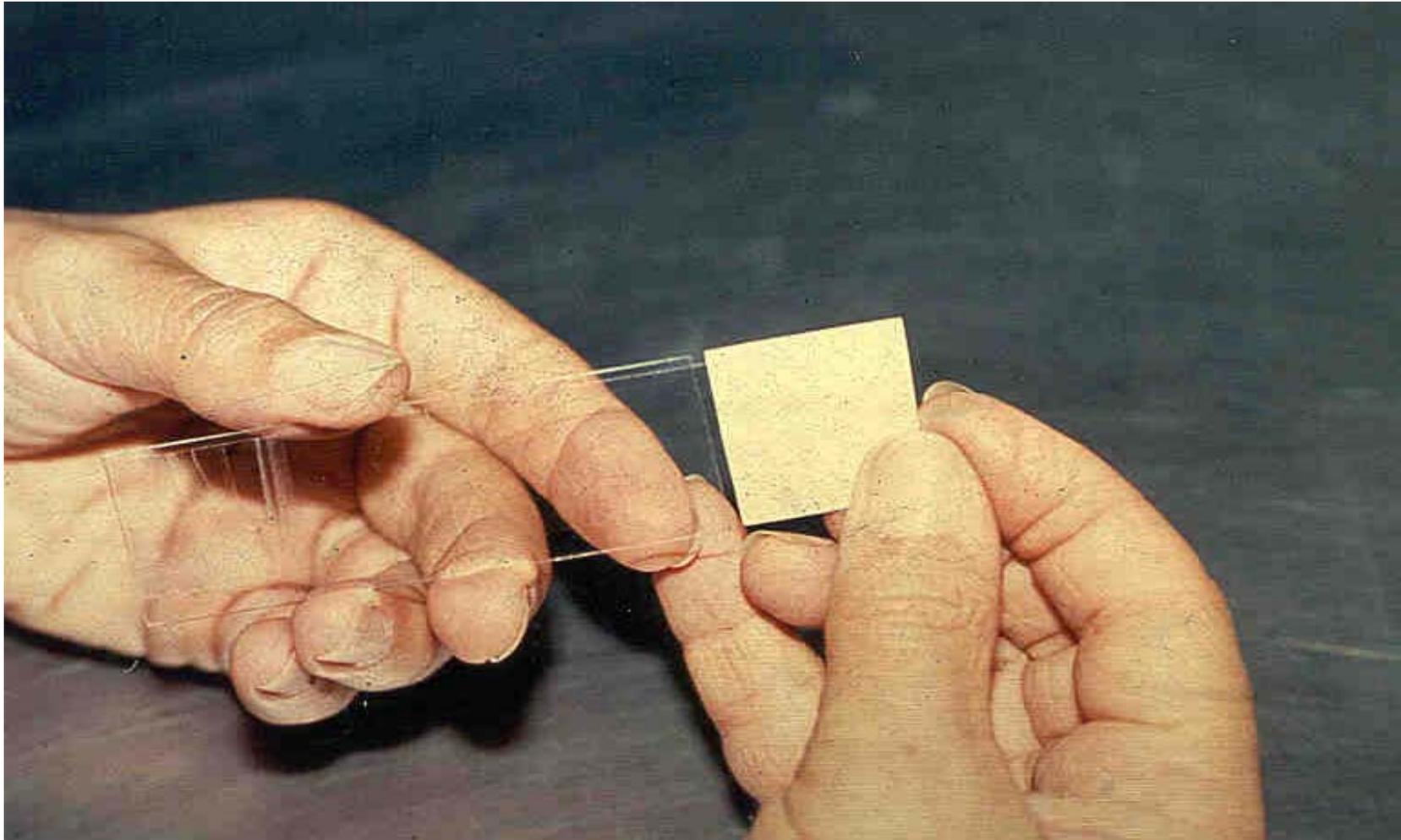



Corresponder etiqueta con nombre en boleta

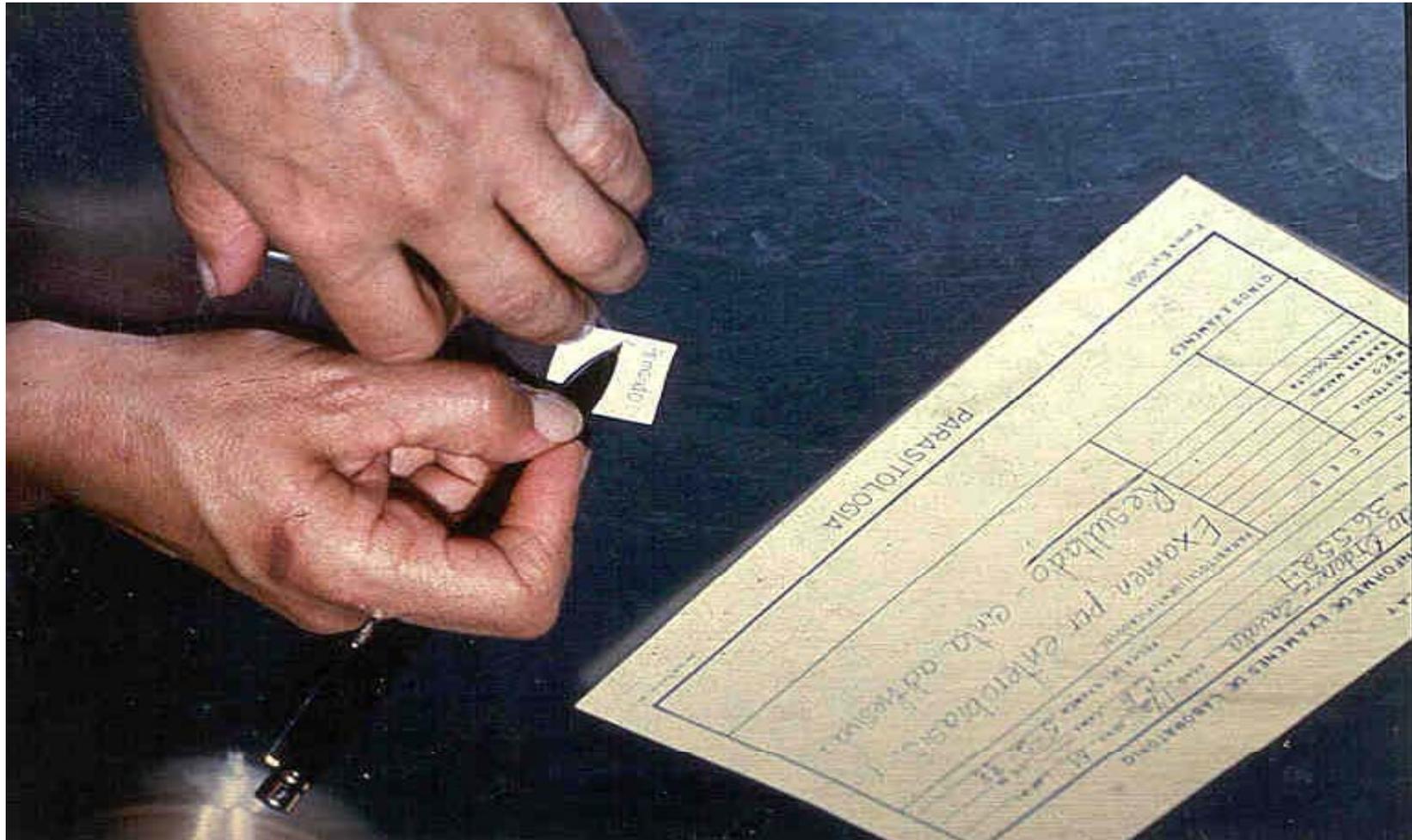



Instrucciones

- Explicar con palabras fáciles y sencillas:
- Paciente al despertar, antes de lavado.
- Paciente en decúbito, mano izquierda separa glúteos.
- Separar con cuidado cinta adhesiva.
- Colocar sobre baja-lenguas y doblar.
- Parte adhesiva hacia afuera; mano derecha recoge muestra.



Dando instrucciones con demostración






En casa, al despertar






Al momento de usar, despegar la cinta con cuidado

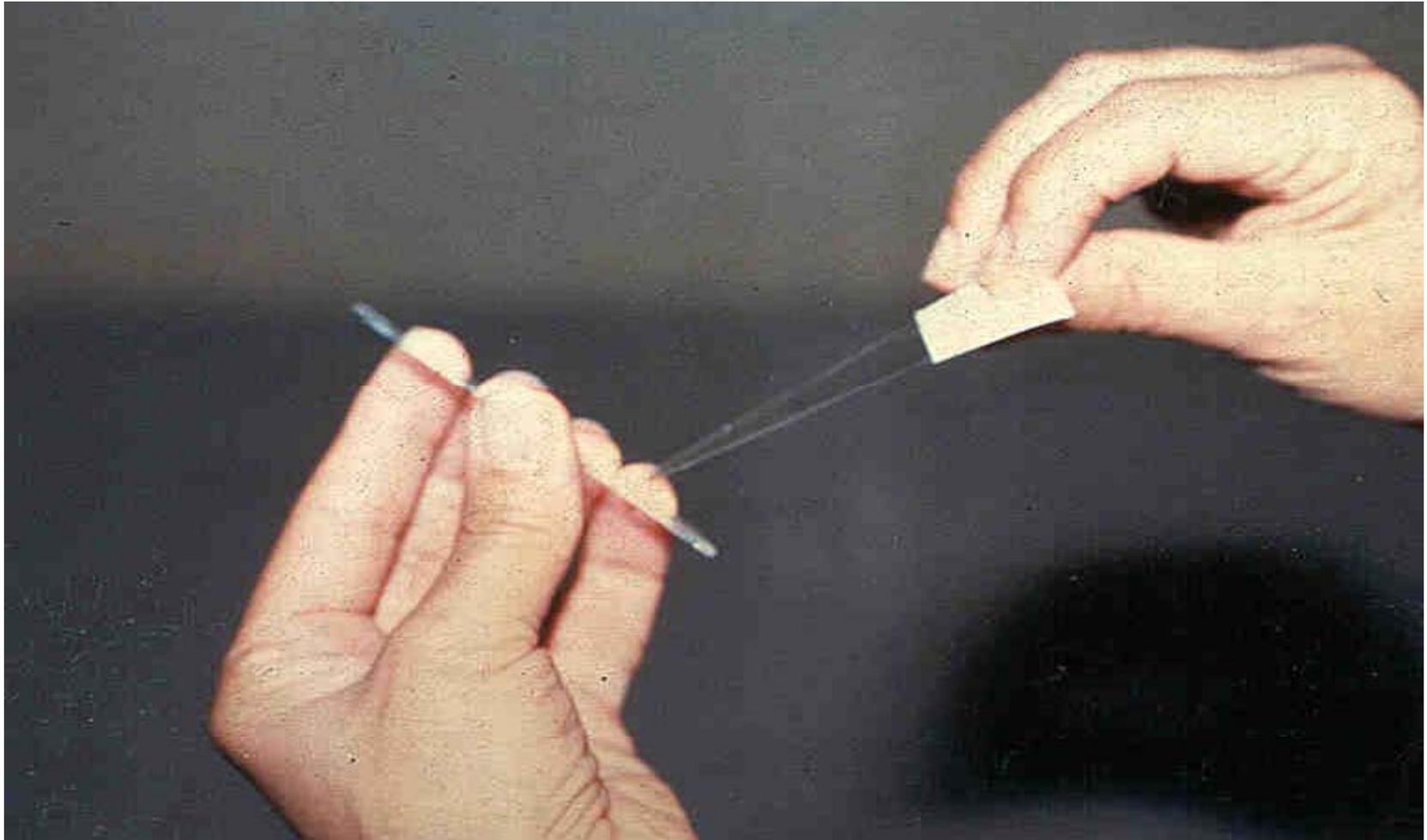




Colocar el baja-lenguas por la parte sin pegamento

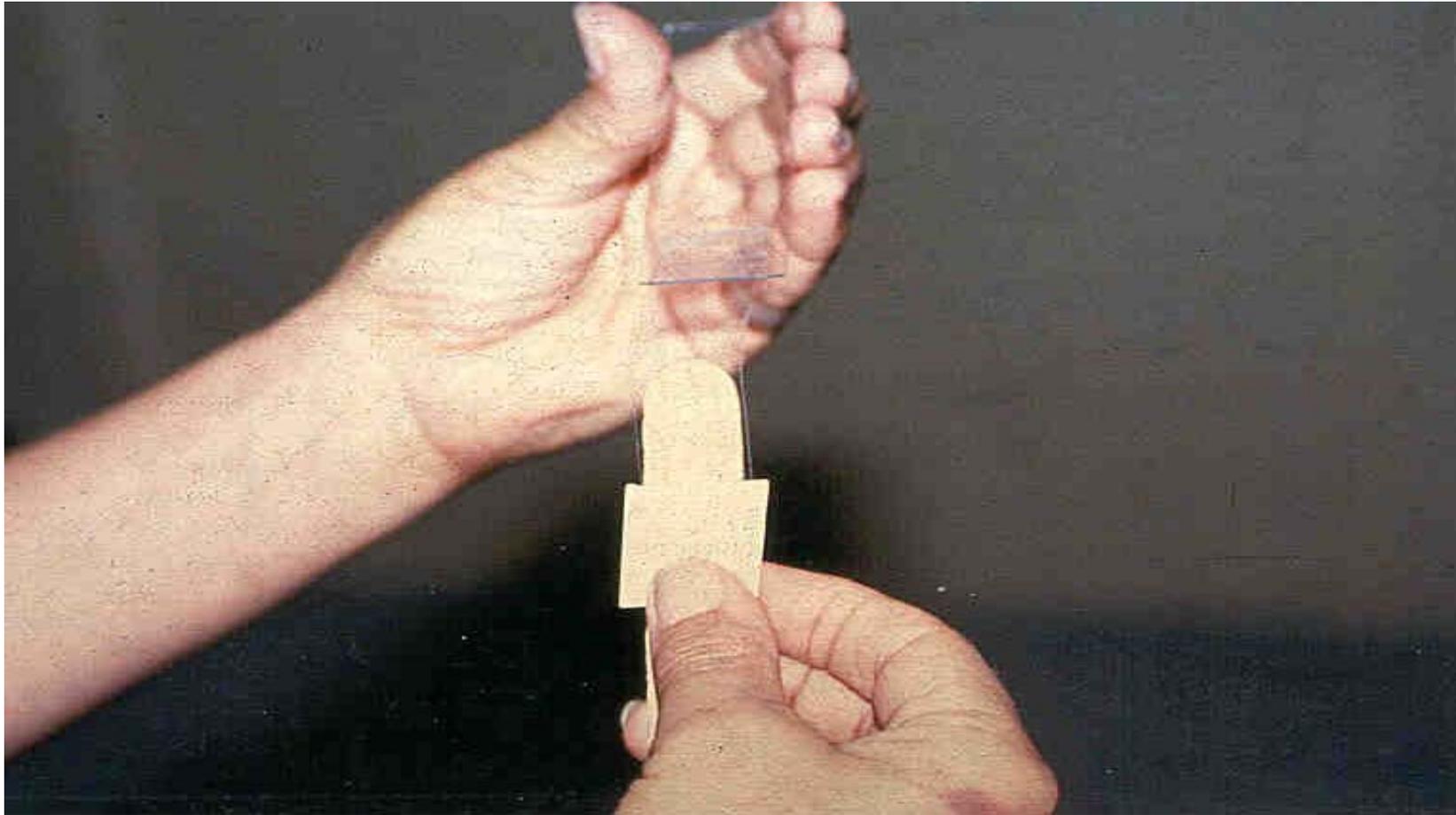



Sostener por etiqueta y doblar sobre baja-lenguas

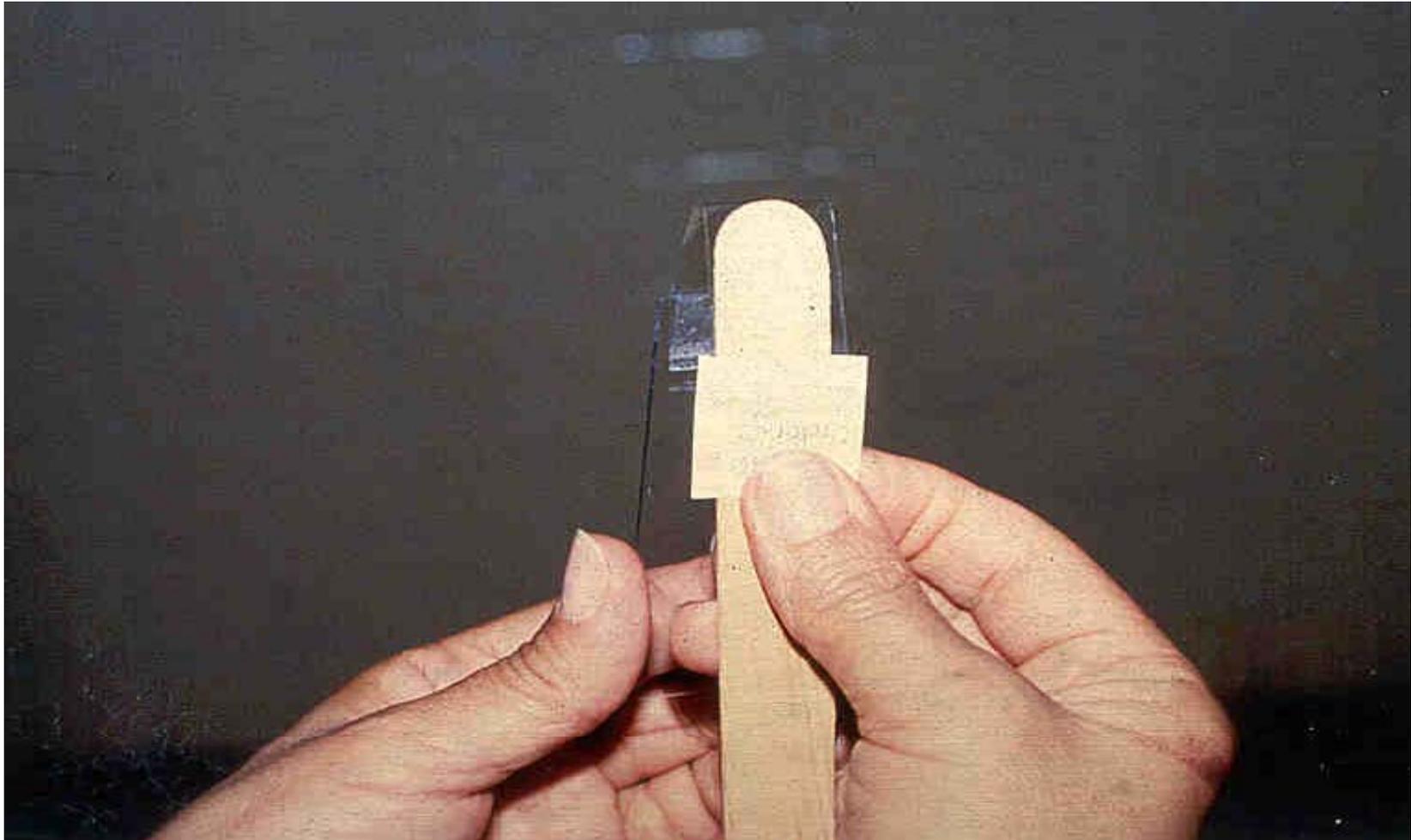



Siguiendo instrucciones





En la consulta externa






Separar glúteos






Colocar cinta sobre pliegues
anales y perianales de ambos
lados

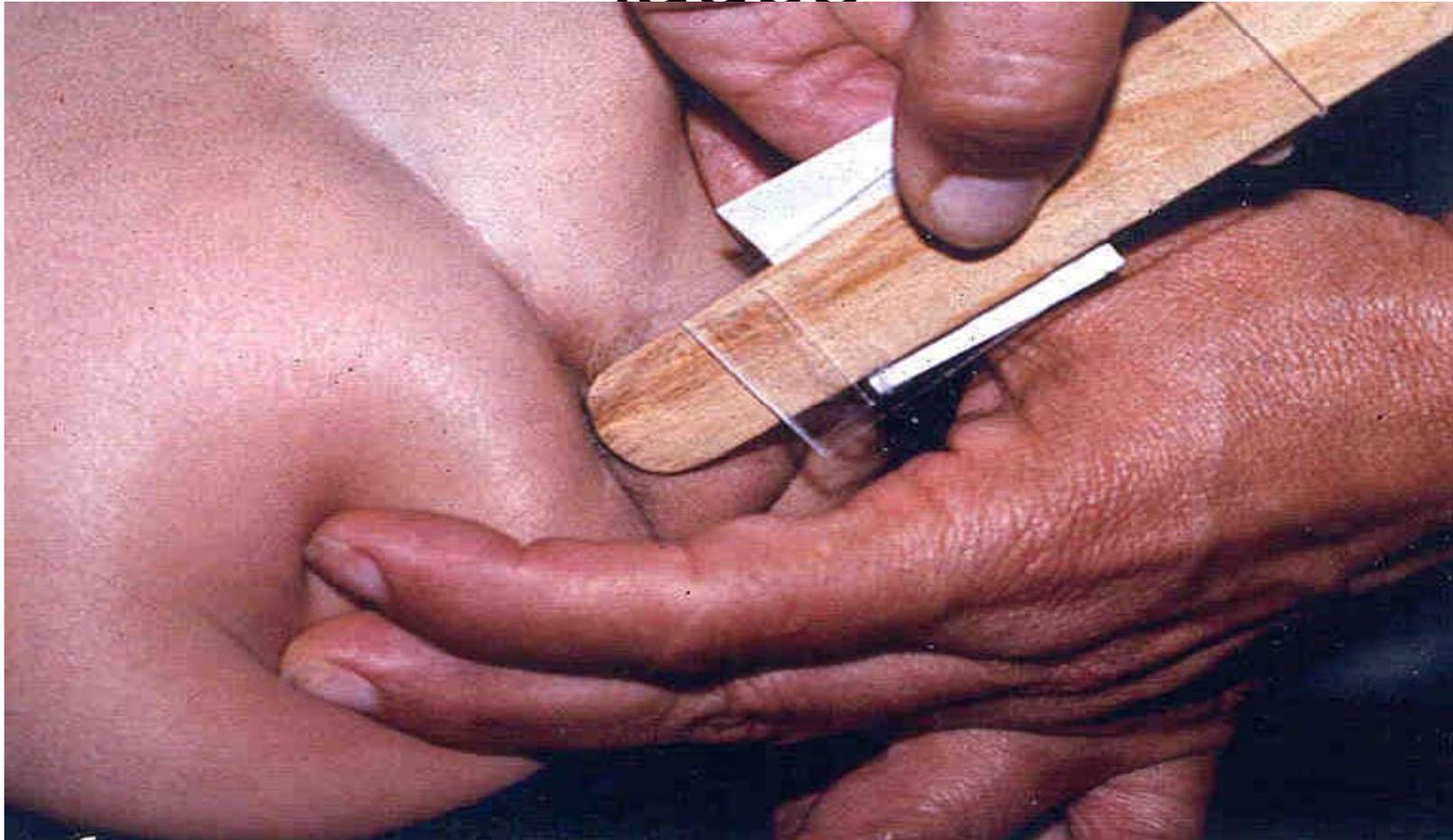



Consulta externa, una gota de xilol

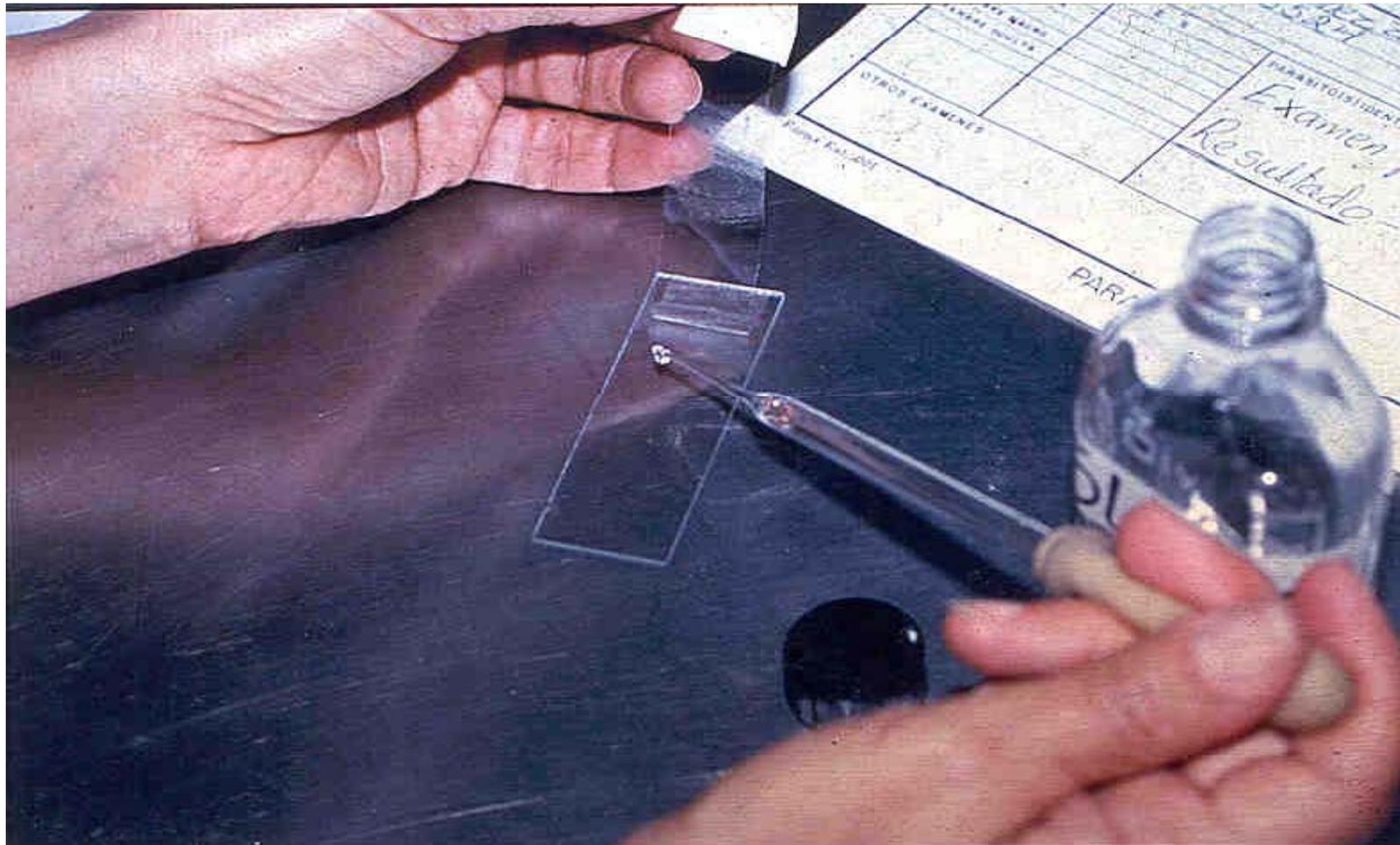



De casa al laboratorio...






Huevos de *Enterobius vermicularis*






Huevos de *Taenia* spp.

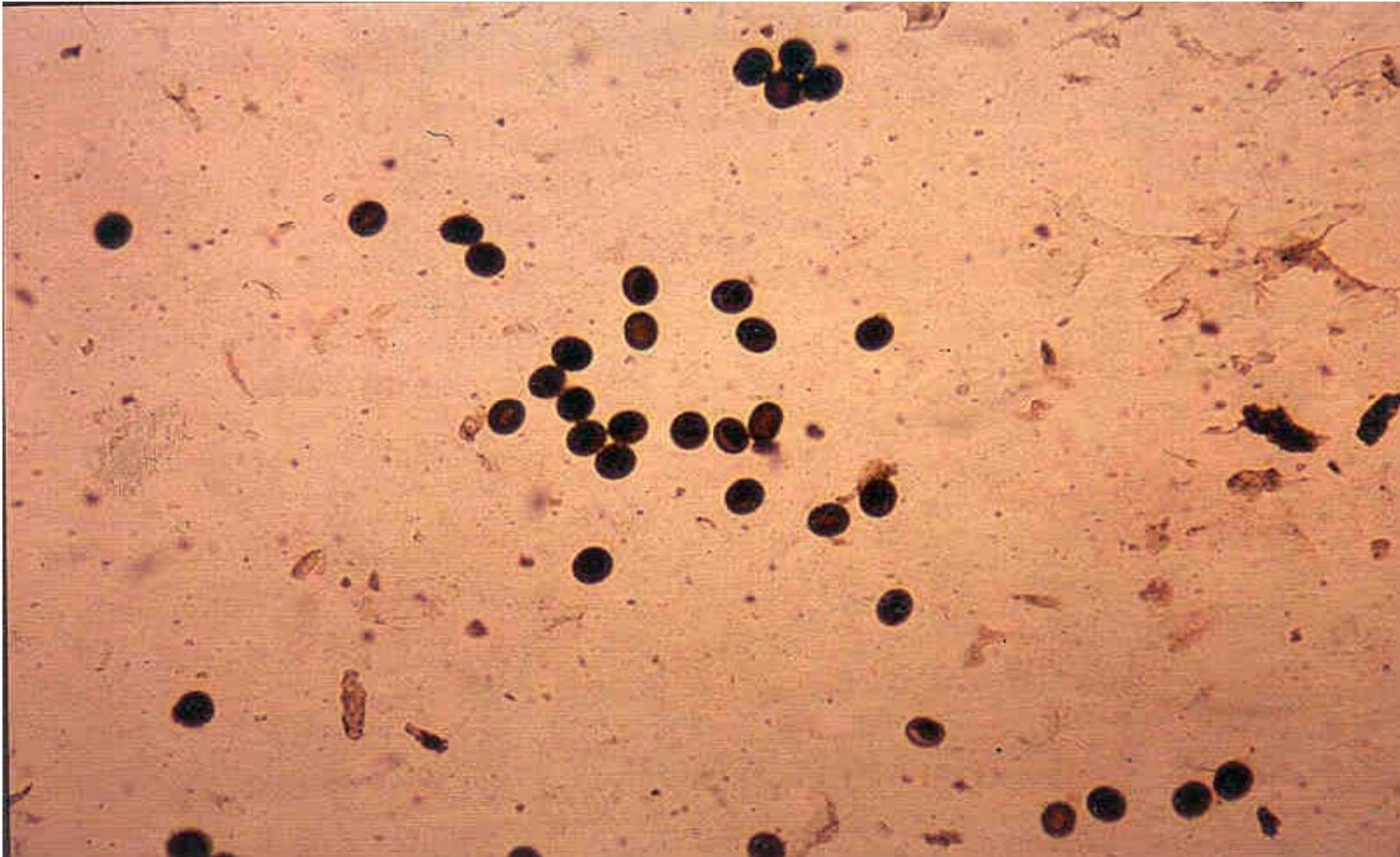



Confirmar ganchos en oncosfera

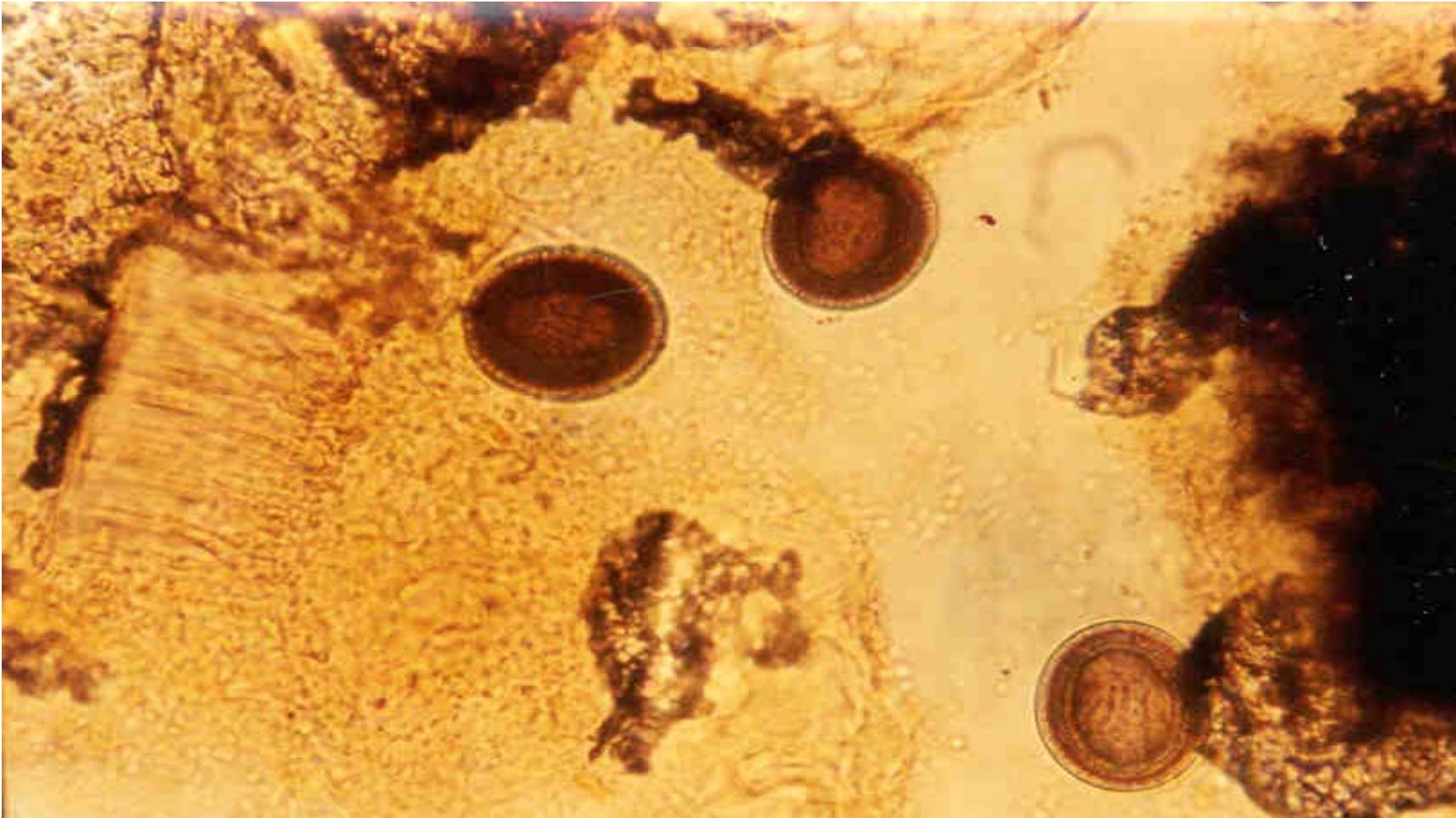



Desinfectar



Descartar en desinfectante





Lavado de manos





Registrar resultados